

SCHEMA TECNICA


Gli elettrodi Ambu® Subdermale a Spirale e a Spirale Intrecciati sono elettrodi in acciaio inossidabile che si avvitano nel cuoio capelluto dei pazienti.

Gli elettrodi sono progettati con un'impugnatura ergonomica, cavi conduttori codificati a colori e sono dotati di connettori DIN 42802 touch-proof da 1,5 mm.

Gli elettrodi a spirale sono stati sviluppati per essere utilizzati per il monitoraggio, la registrazione e la stimolazione dei segnali del potenziale biologico e nervoso.

Ambu® Ago Subdermale a Spirale

Ambu® Ago Subdermale a Spirale Intrecciato

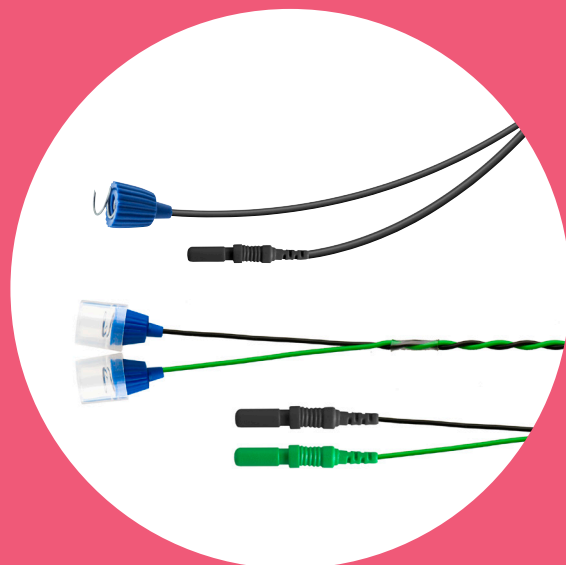

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Progettato con un'impugnatura ergonomica per il massimo comfort

Ago dell'elettrodo in acciaio inossidabile

Cavetti colorati per una facile identificazione dell'elettrodo

Connettori DIN 42802 touch-proof da 1,5 mm

Dispositivo monouso

Classe dispositivo: IIa - Sterile

CND: N010101

RDM: 387965

APPLICAZIONI RACCOMANDATE

Monitoraggio Intraoperatorio (IOM)

Elettroencefalogramma (EEG)

Potenziali Evocati (EP)

Ambu

SPECIFICHE

Elettrodo

Tipo connettore	Connettore touch-proof 1,5 mm DIN 42802
Metodo di sterilizzazione	Ossido di Etilene (EO)

Ambiente

L'elettrodo, il cavo e l'imballaggio non sono realizzati con lattice di gomma naturale
Il confezionamento è senza PVC


MATERIALI

Elettrodo


Ago	0,60 mm (calibro 23 gauge), acciaio inossidabile
Alloggiamento in plastica	PVC
Cavo	Filo di rame stagnato isolato in PVC

Packaging

Buste, strato trasparente	Poliestere/Polietilene
Buste, strato di carta	Carta
Scatole	Cartone

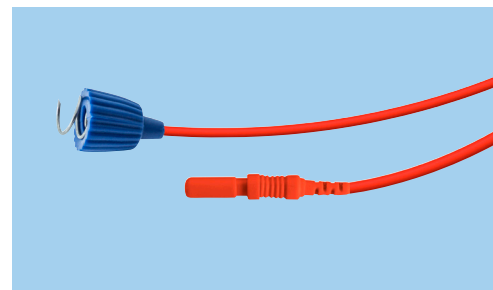

Ago a spirale subdermale

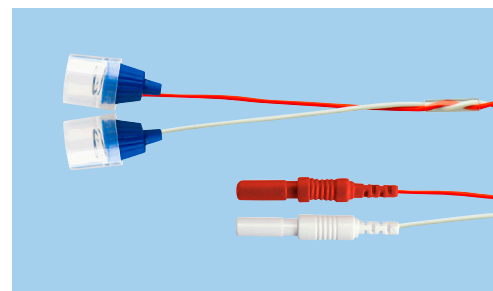

Ago a spirale subdermale intrecciato

SPECIFICHE ORDINAZIONE

Ref.	Lunghezza cavo		Colore cavo	Durata in mesi (buste chiuse)	Unità/busta	Packaging	
	cm	inch				Unità/scatola	Unità/scatolone
Ago a spirale subdermale							
74715-60/24	120	47"		36	1	24	576
74720-60/24	200	79"		36	1	24	576
74725-60/24	250	98"		36	1	24	576
Ago a spirale subdermale intrecciato							
74812-60/12	120	47"		36	1	12	576
74820-60/12	200	79"		36	1	12	576
74825-60/12	250	98"		36	1	12	576

Ambu

Distribuito da:

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Prodotto da:

Technomed Europe

Amerikalaan 71
6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands

0344 US: Rx only